



## KARBOKSYTERAPIA TOWER

17999 zł brutto



[Przejdź na stronę produktu](#)

### KARBOKSYTERAPIA CO2

POLDERMA EDGE CO2 to jeden z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych urządzeń do karboksyterapii – jednej z najskuteczniejszych i najbardziej bezpiecznych metod wykorzystywanych w medycynie estetycznej i kosmetologii.

Metoda polega na podskórnym podaniu dwutlenku węgla, co skutkuje lepszym dotlenieniem i ukrwieniem okolic zabiegu. W efekcie skóra staje się lepiej odżywiona i lepiej wygląda. Zabieg ma zastosowanie szczególnie w terapii cellulitu.

### PRZEWAGA

#### \* POLSKI PRODUKT

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce przez inżynierów z wieloletnim stażem w branży kosmetycznej i medycznej.

\* CERTYFIKOWANE MATERIAŁY

Urządzenie pracuje na gazie medycznym, który jest wyjątkowo sterylny (czystość na poziomie 99,5%).

\* GOTOWE PROGRAMY ZABIEGOWE

Wybieraj spośród zdefiniowanych programów zabiegowych – pracuj wygodniej i skuteczniej!

\* REGULACJA DAWKI, PRZEPŁYWU ORAZ TEMPERATURY

Reguluj dawkę i przepływ, aby wykonywane zabiegi były jeszcze bardziej precyzyjne, a przez to bezpieczniejsze dla pacjenta.

## KARBOKSYTERAPIA CO<sub>2</sub>


Bezpieczna, bezbolesna i nieinwazyjna terapia wykorzystująca dwutlenek węgla – podawany podskórnie lub śródskórnie. Dwutlenek węgla przenika do tkanek, dzięki czemu następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększa się przepływ krwi, a w wyniku tego odżywienie tkanek w składniki odżywcze i dotlenienie. Poprawia się mikrokrążenie, przyspieszony zostaje proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Dodatkowe efekty to rozbicie tkanek tłuszczowych, nasilona produkcja kolagenu, poprawa drenażu limfatycznego.

Metoda wykorzystywana jako pozbawiona efektów ubocznych alternatywa dla zabiegów wykonywanych operacyjnie.

Efekty

Czas rekonwalescencji jest wyjątkowo krótki, a widoczne „gołym okiem” efekty zabiegów to zrewitalizowana skóra, sprężysta i jędrna.

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dawkowanie gazu                                     | od 0-150 cc/min                         |
| Filtracja                                           | filtry antybakteryjne oraz hydrofobowe; |
| Odpowietrzanie                                      | tak                                     |
| elektroniczna weryfikacja ciśnienia CO <sub>2</sub> | tak                                     |
| Programy automatyczne                               | twarz, ciało, skóra głowy               |
| Funkcja podgrzewania gazu                           | tak                                     |
| Wyświetlacz                                         | dotykowy, lcd                           |
| Waga                                                | 20kg                                    |
| Pobór mocy                                          | 100W                                    |
| Napięcie                                            | 220-230V                                |

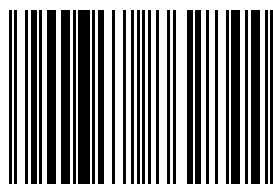

5904358862844