



HYDRA LAB 10.0 **HYDRABRAZJA 6W1**

7900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Multifunkcyjne urządzenie kosmetyczne, wyposażone w 6 nowoczesnych funkcji zabiegowych.

FUNKCJE URZĄDZENIA

- * Hydrabrazja
- * Kompresorowa infuzja kosmetyków (20% tlenu)
- * Fale radiowe bipolarne
- * Biolifting
- * Ultradźwięki
- * Zimny młotek

HYDRABRAZJA

Przeznaczona jest do wszystkich typów skóry. Jest to idealne rozwiązanie dla osób chcących pozbyć się zmarszczek, przebarwień lub nadmiernej suchości skóry, niedotlenieniem naskórka.

Hydradermabrazja jest najnowszym rodzajem zabiegu, który łączy mikrodermabrazję bez użycia materiałów ściernych z ciśnieniową aplikacją serum z przeciwutleniaczami.

Aparat działa na zasadzie kompresora. Sól fizjologiczna znajdująca się w zbiorniku A, wyrzucana jest z dużą prędkością ze specjalnie zaprojektowanej dyszy na skórę, następnie wraca do zbiornika B ze zużytą solą. Brak butli znacznie zmniejsza koszty zabiegu oraz umożliwia łatwe przenoszenie urządzenia.

ZALETY

- * zabieg całoroczny,
- * poprawa elastyczności skóry,
- * wygładzenie skóry i mniejszych zmarszczek,
- * ujednolicenie koloru skóry,
- * mocne nawilżenie,
- * zmniejszenie blizn i zmian trądzikowych,
- * odblokowanie porów - dodanie skórze blasku,
- * „wyciszenie” skóry,
- * dotlenienie,
- * wzmocnienie naczynek,
- * mniej odczuwalne pieczenie niż przy mikrodermabrazji,
- * zabieg jest bezbolesny,
- * zwiększona absorpcja składników aktywnych.

KOMPRESOROWA INFUZJA KOSMETYKÓW

(20% tlenu) polega na wprowadzaniu preparatów aktywnych do skóry przy pomocy oczyszczonego powietrza przez specjalny zespół filtrujący. Zabieg wykonywany jest aerografem posiadającym pojemnik, który możemy uzupełnić dowolnym preparatem.

CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA (RF)

Jest rodzajem widma elektromagnetycznego. Są to wysokiej częstotliwości przemienne fale elektromagnetyczne. Podczas działania RF na skórze, włókna kolagenu ogrzewają się do 45°C -65°C. Następnie włókna kolagenowe kurczą się, niwelując zwiotczałą skórę i stymulują kolagen. RF pozostawia warstwę skóry właściwej jędrną i elastyczną, oraz usuwa zmarszczki.

DZIAŁANIE

- * podwyższenie temperatury tkanek skóry,
- * poprawa funkcjonalności komórek: podskórnych i tkanki mięśniowej,
- * poprawa cyrkulacji krwi i limfy,
- * wzrost oczyszczania tlenu,
- * poprawa metabolizmu,

- * zwiększenie substancji odżywczych, przeciwciał, krwinek białych i limfy,
- * zwiększenie elastyczności,
- * zwiększenie produkcji kolagenu,
- * wzrost mięśni,
- * uśmierzanie bólu,
- * stymulacja gojenia się ran,
- * efekt chirurgicznego liftingu twarzy,
- * ujędrnienie skóry,
- * leczenie trądziku.

BIOLIFTING


Jest metodą elektroterapeutyczną opartą na prądach impulsowych. Procesy zachodzące podczas zabiegu bioliftingu w sposób niezwykle aktywny pobudzają regenerację tkanek, powodują wygładzenie skóry i zwiększenie tonusu mięśniowego. Efektem jest ujędrnienie i poprawa owalu twarzy. Aparaty typu biolifting wykorzystują prąd o bardzo niskim natężeniu, podczas zabiegu odczywalny jako delikatne mrowienie. Podczas zabiegu mikroprąd dociera tam, gdzie zawiódł prąd naszego organizmu. Następuje miejscowe przekrwienie, zwiększa się metabolizm skóry i tkanki mięśniowej. Pod wpływem mikroprądów następuje przyspieszenie odnowy komórkowej, a działanie liftingowe jest efektywniejsze.

ZALETY

- * zmniejszenie zmarszczek,
- * poprawa poziomu nawilżenia,
- * zwiększenie tonusu mięśni,
- * rozjaśnienie skóry,
- * zwężenie porów,
- * aktywacja komórkowa,
- * odmłodzenie skóry,
- * zmniejszenie worków i cieni pod oczami,
- * poprawa trofiki tkanek,
- * wzmocnienie bariery ochronnej skóry.

Pobór mocy	110W
Częstotliwość pracy	50-60Hz
Ciśnienie infuzji	1Bar
Podciśnienie hydrabrazji	65cmHg
Częstotliwość fali radiowej	1Mhz
Natężenie bioliftingu	0-20mA
Częstotliwość ultradźwięków	1Mhz

Moc ultradźwięków	1W/cm2
Temperatura minimalna młotka	5 stopni Celsjusza
Wymiary	40x34x34cm

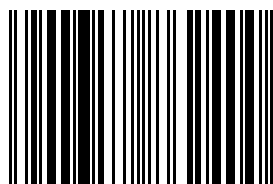

5904358862400