



FERRI MOBILNY LIFTING PODCIŚNIENIOWY Z TENS, MEZOTERAPIA TTS, CELLULOGIA

6900 zł brutto



[Przejdź na stronę produktu](#)

PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TTS (ELEKTROPORACJA, ULTRADŹWIĘKI), CELLULOGIA (MASAŻ PODCIŚNIENIOWY ALUMINIOWYMI GŁOWICAMI).

PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS

Masaż próżniowy w połączeniu z elektrostymulacją TENS działa wzmacniająco na mięśnie twarzy, ujędźnia skórę oraz stymuluje układ limfatyczny. Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów).

DZIAŁANIE

- * pobudzeniu miejscowego ukrwienia – przyspieszenie gojenia, usunięcie obrzęków,
- * zapobieganie zanikom mięśniowym – utrzymanie mięśni w ruchu bez obciążania stawów,
- * lepsze odżywianie tkanek,
- * szybkie usunięcie produktów przemiany materii i procesów zapalnych,
- * działanie przeciwbólowe,
- * regulowanie napięcia.

Masaż próżniowy jest połączeniem masażu mechanicznego z podciśnieniem. Jednocześnie podczas zabiegu odciągane są fałdy skóry (zassanie) i rolowane ruchomymi rolkami. Masaż ten często nazywany jest lipomasażem.

Podczas masażu całe ciało, z wyjątkiem piersi, masuje się przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w ruchome rolki i rodzaj ssącej rury. Rolki obracają się wokół własnych osi i masują zassany do głowicy fałd skóry. Poprawia to krążenie krwi i przepycha limfę.

CELLULOGIA (MASAŻ PODCIŚNIENIOWY ALUMINIOWYMI GŁOWICAMI)

Cellulogia to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Cellulogia jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

DZIAŁANIE

- * modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- * zmniejszenie cellulitu,
- * ujędrnienie ciała,
- * wspomaganie drenażu limfatycznego,
- * poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- * spłycenie blizn,
- * niwelacja rozstępów,
- * możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TTS (ELEKTROPORACJA, ULTRADŹWIĘKI)

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

PROGRAMY ZABIEGOWE

- * okolice oczu,
- * revital 20+,
- * revital 30+,
- * odmładzanie 40+,
- * lifting 45+,
- * trądzik,
- * ujędrnianie,
- * cellulit,
- * wyszczuplenie,
- * rozstępy,
- * na skórę głowy,
- * na bóle mięśni.

DZIAŁANIE

- * błyskawiczny lifting twarzy,
- * poprawa kolorytu skóry,
- * działanie odmładzające i regenerujące,
- * dotlenienie i odżywienie tkanek,
- * modelowanie.

PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS

Częstotliwość	120 Hz
Siła prądu TENS 0	6.4 mA
Podciśnienie 0	0,8 bar


MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TTS

Zakres czasu pracy	30 sekund - 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
Częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
Moc wyjściowa	0,04 W/cm ² - 0,28 W/cm ²
Zakres natężenia	0,0 mA - 6,4 mA
Zakres skali pulsacji(wypełnienia)	5% - 100%

CELLULOGIA

Czas pracy	0-60 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	60 W

Podciśnienie	5-20 inHg
--------------	-----------

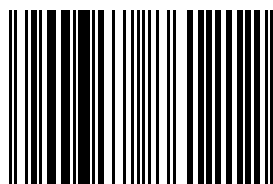

5904358861212