



TERMOSALUD LINFOPRESS EVOLUTION PRO URZĄDZENIE DRENAŻ LIMFATYCZNY

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Produkt dostępny wyłącznie dla kupujących prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRODUKTY TERMOSALUD?

Termosalud jest uznanym Hiszpańskim producentem urządzeń medycznych i kosmetycznych z blisko 50 letnim doświadczeniem.

Wszystkie produkty fabryki z Gijon charakteryzuje wysoka jakość wykonania potwierdzona certyfikacją ISO, zgodność z normami europejskimi zweryfikowana przez laboratorium notyfikowane SGS (Genewa, Szwajcaria).

Termosalud jako jeden z nielicznych producentów wykonuje badania kliniczne na pacjentach - potwierdzając skuteczność swoich rozwiązań. Centrum rozwojowo-produkcyjne Termosalud mieści się na terenie 5000m². Firma szczyci się faktem wykorzystywania do produkcji maszyn wyłącznie europejskich elementów - gwarantując

tym samym długowieczność swoich produktów.

Venus-Beauty.pl ma zaszczyt być wyłącznym dystrybutorem Termosalud na terenie Polski.

DLACZEGO LINFOPRESS EVOLUTION PRO?

Drenaż jest jednym z najpopularniejszych zabiegów stosowanych w celu pobudzenia krążenia krwi i limfy. Stymulacja określonych obszarów na ciele sprawia, że składniki odżywcze i tlen dostarczone są do wszystkich komórek. Zabieg usprawnia przepływ chłonki, dzięki czemu wspomaga leczenie cellulitu, likwiduje obrzęki, usuwa z organizmu zbędne produkty przemiany materii, a także ujędrnia i uelastycznia skórę.

INNOWACYJNA BUDOWA KOMÓR UCISKOWYCH

Komory ciśnieniowe w urządzeniu rozmieszczone są tak, aby wzajemnie zachodziły na siebie. W ten sposób możliwy jest jednoczesny ucisk wszystkich poddanych zabiegowi obszarów ciała. Skośny układ komór sprawia, że limfa przepływa poziomo i pionowo w kierunku węzłów chłonnych ciała. Spodnie do zabiegu zostały stworzone dla obszaru od stóp aż po brzuch, aby równomiernie dociskać całą powierzchnię. Mankiety wyposażone są w 24 komory powietrzne, które rozłożone są równomiernie na całej strefie zabiegowej.


Zapinane są za pomocą zamków, które można dopasować do sylwetki klienta. Urządzenie posiada również zastosowanie na kończyny górne. Wyposażone jest w specjalną kurtkę do wykonania zabiegu ramion, pleców, klatki piersiowej i brzucha. Kurtka nie wchodzi w skład zestawu bazowego.

DZIAŁANIE ZABIEGU PRESOTERAPII

- * zmniejsza cellulit,
- * likwiduje uczucie „ciężkich nóg”,
- * zmniejsza obrzęki,
- * przyspiesza krążenie krwi i limfy,
- * oczyszcza organizm z toksyn,
- * poprawia jędrność i elastyczność skóry,
- * likwiduje obrzęki limfatyczne i żyłne.

Napięcie	220-230V (50-60Hz)
Konsumpcja maksymalna	180VA
Maksymalne ciśnienie	80mmHg
Ilość komór	24
Czas zasysania	0,5-25sec

Czas trwania zabiegu	20/30/45min
Klasyfikacja	Klasa I typ BF
Ochrona	IPXO
Wyświetlacz	10,2", LED, dotykowy
Wymiary	50x44x50cm
Waga	18Kg

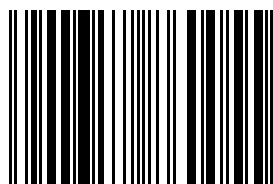

5904358860055