



## ARISA OPT E-LIGHT

16900 zł brutto



[Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ. URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

### IPL/E-LIGHT

Działanie IPL polega na produkcji szerokiego spektrum niespójnych fal świetlnych, które w związku z ich różną długością mogą być absorbowane przez określone chromofory zawarte w tkankach (melanina, hemoglobina). Tkanki zawierające poszczególne chromofory zostają uszkodzone w efekcie zjawiska fototermolizy selektywnej, czyli bez uszkodzania sąsiednich tkanek. Potrzebną do danej terapii długość fal świetlnych uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnych, wymiennych filtrów.


RF BIPOLARNY (FALE RADIOWE BIPOLARNE) jest to fala elektromagnetyczna o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermii w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

#### ZASTOSOWANIE

- \* usuwanie owłosienia,
- \* usuwanie zmarszczek,
- \* lifting twarzy,
- \* rumień,
- \* likwidacja trądziku,
- \* spłykanie głębokich blizn i rozstępów,
- \* usuwanie cellulitu,
- \* redukcja chemicznych,
- \* usuwanie blizn potrądzikowych,
- \* usuwanie przebarwień,
- \* poprawa owalu twarzy,
- \* fotoodmładzanie.

Producent: SUNWIN HK

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| gęstość energii          | 1-50 J/cm <sup>2</sup>                                                             |
| sekwencje impulsów       | 1-10Hz                                                                             |
| filtry                   | 450/530/640-1200nm                                                                 |
| przerwy między impulsami | 5-50 ms                                                                            |
| wielkość plamki          | 15x50mm                                                                            |
| wyświetlacz              | 8,0" - technologia LCD                                                             |
| zasilanie                | 220V 50 Hz                                                                         |
| pobór mocy               | 2000W                                                                              |
| system chłodzenia        | chłodzenie wodą destylowaną, chłodzenie powietrzen, chłodzenie przez półprzewodnik |
| temperatura chłodzenia   | -4st. C-0st. C                                                                     |
| waga netto               | 38kg                                                                               |
| wymiary                  | 58x40x35cm                                                                         |

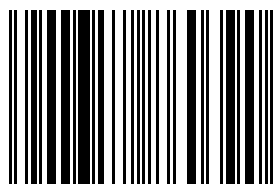

5904358860390